

Sterylizator z programem do dezynfekcji maseczek



Sterylizator na suche powietrze z grawitacyjnym obiegiem powietrza gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo sterylizacji narzędzi i dezynfekcji maseczek.

Sterylizator wyposażony w prowadnice na którym możemy umieścić w zależności od modelu od 1 do 8 półek.

Sterylizator wyposażony w stojaki na maseczki - ilość stojaków uzależniona od modelu i potrzeb klienta.

Sprzęt jest całkowicie bezpieczny i bardzo łatwy w obsłudze.

Regulator PID.

Sterylizator posiada:

- 3 programy sterylizacji:
 - 1 program - 160°C - czas ekspozycji 2.30; 3.00; 3.30 h,
 - 2 program - 180°C - czas ekspozycji 1.00; 1.30; 2.00 h,
 - 3 program - 200°C - czas ekspozycji 0.45; 1.00; 1.30 h.
- 1 program dezynfekcji - 80°C - czas ekspozycji 0.30 h.
- Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry.
- Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem zadanych temperatur.
- Półki oraz stojaki na maseczki*,**.

Opcje dodatkowe:

Pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym.

Podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy).

Alarm otwartych drzwi.

Drzwi mocowane z lewej strony.


Zamknięcie na klucz.

Przepust do wprowadzania dodatkowych czujników.

Kominki wentylacyjne.

Kontrola stanu domknięcia kominków wentylacyjnych podczas procesu sterylizacji.

Sygnalizacja akustyczna oraz przerwanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwi lub kominków.

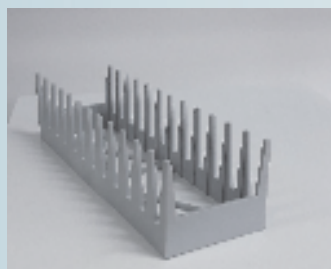

* Stojak na 12 maseczek



** Stojak na 17 maseczek



Max ilość odkażonych maseczek w czasie 1 cyklu

	SP/D-18G	SP/D-30G	SP/D-65G	SP/D-100G	SP/D-140G	SP/D-150G	SP/D-200G
Stojak na 12 maseczek	24	48	96	144	192	192	288
Stojak na 17 maseczek	34	68	136	204	272	272	408

Dane techniczne	j.m.	SP/D-18G	SP/D-30G	SP/D-65G	SP/D-100G	SP/D-140G	SP/D-150G	SP/D-200G	
Pojemność	dm ³	17	39	75	115	143	150	220	
Ilość półek min/max	szt.	1/2	1/2	2/4	2/4	3/8	2/4	3/8	
Ilość stojaków min/max	szt.	1/2	1/4	2/8	2/12	3/16	2/16	3/24	
Moc znamionowa	W	800	1000	1500	2600	2200	2200	2800	
Masa netto aparatu	kg	24	34	44	56	78	78	88	
Wymiary aparatu	szerokość	mm	430	590	590	780	590	950	780
	wysokość	mm	420	420	670	670	1150	670	1150
	głębokość	mm	495	495	495	495	495	495	495
Wymiary komory	szerokość	mm	200	360	360	550	360	720	550
	wysokość	mm	270	270	520	520	1000	520	1000
	głębokość	mm	400	400	400	400	400	400	400